



VACUETTE® QUICKSHIELD Complete



Sikkerhetsrørholder
og VACUETTE® Kanyle i kombinasjon

Bruerveiledning

Tiltenkt bruk: QUICKSHIELD Complete er laget for rutinemessig venepunksjon og den må kun brukes sammen med VACUETTE® vakuumsrør som et helhetlig system. Produktet skal bare brukes av helsepersonell med relevant opplæring og i henhold til disse instruksjonene.

Produktbeskrivelse: QUICKSHIELD Complete er en steril enkeltpakket engangs QUICKSHIELD sikkerhetsrørholder laget av plast med ferdig montert VACUETTE® Kanyle. QUICKSHIELD Complete har et beskyttelsesskjold som skal aktiveres og dermed dekke kanylen umiddelbart etter venepunksjonen, noe som gir økt beskyttelse mot utilsiktede stikkskader.

Forholdsregler/Forsiktighetsregler

Forholdsregler

Kontroller QUICKSHIELD Complete før bruk. Ikke bruk produktet dersom det er skadet! QUICKSHIELD Complete som blir kontaminert av blod, anses som smittefarlig og må kastes umiddelbart. IKKE sett den opprinnelige beskyttelseshetten tilbake på kanylen igjen. Etter venepunksjonen skal beskyttelsesskjoldet aktiveres og den brukte QUICKSHIELD Complete kastes som én enhet i en egnet beholder for skarpe gjenstander, i henhold til interne prosedyrer og retningslinjer. Hold hendene bak kanylen hele tiden ved bruk og avhending.

Forsiktighetsregler

1. Alle biologiske prøver og skarpe gjenstander for blodprøvetaking (lansetter, kanyler, luer-adaptore og venepunktsett) skal håndteres i henhold til lokale prosedyrer og retningslinjer.
2. Oppsøk lege ved eksponering med biologiske prøver (for eksempel ved stikkskade), ettersom de kan overføre HIV, hepatittvirus eller andre blodbårne patogener.
3. Kast alle skarpe gjenstander for blodprøvetaking i godkjente risikoavfallsbeholdere.
4. Hansker bør brukes under venepunksjonen for å redusere eksponeringsfaren.

Oppbevaring

QUICKSHIELD Complete skal oppbevares ved 4–36°C (40–97°F).

MERK: Unngå å utsette holderne for direkte sollys. Dersom den anbefalte maksimumstemperaturen overskrides, kan holderen svekkes.

Håndteringsprosedyrer

LES HELE DETTE DOKUMENTET FØR VENEPUNKSJONEN UTFØRES.

BRUK HANSKER UNDER VENEPUNKSJON OG VED HÅNDTERING AV BLODPRØVERØR FOR Å REDUSERE EKSPONERINGSFAREN.

1. Åpne den sterile enkeltpakningen og ta ut QUICKSHIELD Complete.

MERK: Den sterile enkeltpakningen er en indikator for sterilitet og produktintegritet. Dersom pakningen er brutt eller skadet, må QUICKSHIELD Complete kastes.

2. Desinfiser punksjonsstedet med et egnet antiseptisk middel. IKKE BERØR punksjonsstedet etter desinfisering. Sett på og stram stasebåndet (maks 1 min.).
3. Hold pasientens arm rettet nedover. Fjern beskyttelseshetten over kanylen. Utfør venepunksjonen MED ARMEN RETTET NEDOVER OG KORKEN PÅ RØRET VENDT OPPOVER.

MERK: Pass på at kanylen ikke blir bøyd. Ikke bruk QUICKSHIELD Complete dersom kanylen er bøyd.

4. Trykk det første vakuumsrøret inn i QUICKSHIELD Complete slik at den bakre delen av kanylen trenger helt igjennom gummiene i midten av korken. Pass på at røret blir punktert i midten av korken slik at ikke sideveggene punkteres med påfølgende for tidlig vakuumslep.

5. LØSNE STASEBÅNDET MED EN GANG BLODET BEGYNNER Å STRØMME INN I RØRET. IKKE LA INNHOLDET I RØRET KOMME I KONTAKT MED KORKEN ELLER BAKENDEN PÅ KANYLEN UNDER FYLLINGEN. Vakuumsøret må ikke under noen omstendighet vendes opp ned under prosedyren. Hold alltid røret på plass ved hjelp av tommelen for å sørge for fullstendig vakuumsug. Når det første røret er fylt og blodstrømmen stanser, fjernes røret forsiktig fra holderen.

MERK: Det kan en sjelden gang lekket blod fra gummiventilen over den bakre delen av kanylen. Følg gjeldende forholdsregler for sikkerhet for å redusere risiko for eksponering med potensielt smittefarlig materiale.

6. Plasser etterfølgende rør i holderen, og fyll dem på tilsvarende måte.




7. Når det siste røret er fylt, fjernes kanylen forsiktig fra venen mens det legges press på punksjonsstedet med en tørr gas- eller bomulldott til blødningen stopper. Gas- eller bomulldotten kan om ønskelig festes med et plaster. IKKE sett den opprinnelige beskyttelseshetten tilbake på kanylen igjen.

MERK: Etter venepunksjonen kan gummiene på toppen av vakuumsøret inneholde blodrester. Følg gjeldende forholdsregler for sikkerhet for å redusere risiko for eksponering med potensielt smittefarlig materiale.

Aktivisering av sikkerhetsskjoldet

Følg prosedyren nedenfor umiddelbart etter at kanylen er fjernet fra venen for å aktivere beskyttelsesskjoldet slik at stikkskade unngås.

1. Sett beskyttelsesskjoldet mot et fast underlag og press det forsiktig over kanylen (fig. A1/A2). Aktivisering med tommelfingeren er også mulig, man skal dog sørge for at tommelfingeren alltid holdes bag sikkerhedsskiltet.
2. Et hørbart "klikk" angir at beskyttelsesskjoldet er aktivert på en korrekt måte (fig. B). Faren for stikkskade er dermed praktisk talt eliminert.

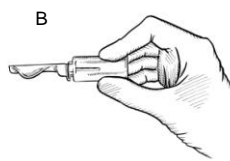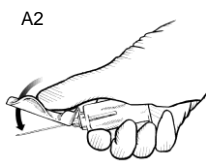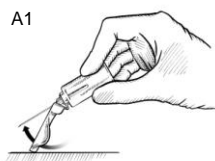

3. Kast den brukte kanylen med VACUETTE® QUICKSHIELD Complete Sikkerhetsrørholder i en egnet godkjent avfallsbeholder (fig. C).








Avhending

Generelle retningslinjer for hygiene og lovmessige bestemmelser for korrekt avhending av infeksjøs materiale skal respekteres og følges.

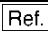Engangshansker begrenser faren for infeksjon.

Kontaminerte VACUETTE® QUICKSHIELD Complete Sikkerhetsrørholdere må kastes i godkjente avfallsbeholdere for infeksjøs materiale som kan autoklaveres og/eller forbrennes.

Symbolforklaring

	Produktnummer
	Batch-kode (Serie)
	Brukes før: den siste datoen i den angitte måneden.
	Steriliseringmetode: Bestråling
	Må ikke gjenbrukes
	Se i bruksanvisningen
	Produsert av



greiner bio-one

Hovedkontor: Greiner Bio-One GmbH, 4550 Kremsmünster, Østerrike Tlf.: +43 07583/6791, Faks: +43 07583/6318
www.greiner-bio-one.com / office@at.greiner-bio-one.com