



VACUETTE[®] Standard Holder Kort og lang version

Brugsvejledning



Anvendelse

VACUETTE[®] Standard holder anvendes kun sammen med VACUETTE[®] prøvetagningsnåle. I kombination med VACUETTE[®] blodprøvetagningsrør udgør de samlet et system der anvendes til rutine veneprøvetagning. Produktet skal anvendes af uddannet sundhedspersonale og som beskrevet i denne brugsanvisning.

Produkt beskrivelse: VACUETTE[®] Standard holder-kort/lang version er en ikke steril engangsholder fremstillet af plastic. Holderne er kompatible med alle VACUETTE[®] prøvetagningsnåle, VACUETTE[®] Luer Adaptorer og VACUETTE[®] prøvetagningsssæt. VACUETTE[®] Standard Holder-lang version kan stables og er ca. 1,4 cm længere end den korte holder.

VACUETTE[®] Forholdsregler

- Kontroller VACUETTE[®] Standard Holder før brug.
- Anvend ikke VACUETTE[®] Standard Holder hvis holderen er beskadiget.
- Enhver VACUETTE[®] Standard Holder der bliver kontamineret med blod er at betragte som smittefarligt affald og bør bortskaffes straks.
- Påsæt aldrig kappen igen på VACUETTE[®] prøvetagningsnåle.
- Efter endt venepunktur bortskaffes VACUETTE[®] Standard Tube Holder-kort/lang som en enhed i en godkendt beholder i henhold til laboratoriets gældende regler og procedurer.
- Hold hænderne bag nålen ved brug og under bortskaffelse.

Forsigtig

1. Biologiske prøver og skarpe genstande til prøvetagning (lancetter, kanyler, luer-adaptore og blodprøvetagningsssæt) skal håndteres i henhold til laboratoriets forskrifter og procedurer.
2. Søg læge ved direkte kontakt med biologiske prøver (f.eks. stikskade), da dette kan overføre hiv (aids), viral hepatitis eller andre smittefarlige sygdomme.
3. Bortskaf skarpe genstande til hudpunktur og blodoverførselsudstyr i godkendte beholdere til smittefarligt affald.
4. Der bør bæres handsker under venepunktur for at minimere smitterisiko.

Bemærk: VACUETTE[®] Standard Holder-kort/lang version er designet til optimal brug i kombination med VACUETTE[®] prøvetagningsnåle fra Greiner Bio-One. Anvendelse af prøvetagningsnåle fra andre leverandører er brugers eget ansvar.

Opbevaring

Opbevar holderne ved 4–25°C.

Undgå opbevaring i direkte sollys. Hvis holderne opbevares ved temperaturer, der er højere end den anbefalede maksimumtemperatur, kan det forringe VACUETTE[®] holderne.

Håndtering og opsamling af prøvemateriale

Læs vejledningen inden venepunktur udføres.

BRUG HANDSKER VED VENEPUNKTUR OG VED HÅNDBETING AF BLODPRØVERØR FOR AT REDUCERE SMITTERISIKO.

1. Fjern forsigtigt forseglingen (der identificerer og indikerer produktets sterilitet og integritet), så bagkanylen ikke beskadiges. Før kanylen ind i kanyleholderen. Sørg for, at kanylen sidder korrekt, så den ikke løsnes ved brug.

Bemærk: Utilstrækkelig/skæv sikring af kanylen i VACUETTE® holderen kan resultere i ødelagt gevind på holder/nål. Denne skade kan føre til at nålen løsnes under prøvetagningen.

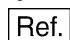

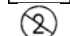
2. Anlæg stase (maks. 1 minut). Desinficer punkturstedet med et antiseptisk middel. Punkturstedet må ikke berøres, efter at det er desinficeret!
3. Venepunktur udføres mens armen holdes nedad. Fjern kappen fra nålen.
4. Skub prøverøret ind i holderen, så bagkanylen perforerer gummiproppen i låget. Sørg for, at prøverøret er centreret, når gummiproppen penetreres for derved at forhindre, at selve røret gennemhulles, og vakuemet dermed forsvinder.
5. FJERN STASEN, SÅ SNART DER ER BLOD I PRØVERØRET. PRØVERØRETS INDHOLD MÅ IKKE NÅ OP OG BERØRE LÅGET ELLER BAGKANYLEN UNDER PRØVETAGNING. Hold røret på plads ved at presse på det med tommelfingeren så komplet vacuumsug sikres. BEMÆRK: Der kan forekomme blodlækage fra kanylekraven. Træf almindelige sikkerhedsforanstaltninger for at reducere risikoen for smittefare.
6. Når det første prøverør er fyldt, og blodstrømmen stopper, fjernes røret forsigtigt fra holderen. Placer det næste prøverør i holderen, hvorved gummiproppen perforeres, og blodet strømmer ned i røret.
7. Fjern kanylen fra patientens vene, så snart blodstrømmen stopper i det sidste prøverør. Hold et tørt, sterilt gazekompres på punkturstedet, indtil blødningen stopper. FORSØG ALDRIG AT SÆTTE KAPPEN PÅ NÅLEN IGEN! Forsøg på at sætte kappen på igen øger risikoen for stikskader og kontakt med blod.

Bemærk: Efter prøvetagning ved venepunktur kan der befinde sig overskydende blod i fordybningen i prøverørets prop. Træf nødvendige sikkerhedsforanstaltninger ved håndtering af prøverør for at undgå kontakt med blod. Kanyleholdere, der er kontamineret med blod, betragtes som smittefarlige og skal straks kasseres. Bortskaf den brugte kanyle og kanyleholder i en beholder, der er beregnet dertil.

Bortskaffelse

- Generelle hygiejne retningslinier og regulativer for korrekt bortskaffelse af infektiøst materiale skal følges og overholdes.
- Brug af engangshandsker kan reducere smitterisiko.
- Kontaminerede VACUETTE® Standard Holder med prøvetagningsnål må bortskaffes straks efter prøvetagning i en for stedet godkendt beholder.

Symbolforklaring.

	Reference nummer. Nummeret anvendes ved bestilling.
	Lot Nummer: batch nummer
	Symbol for engangsbrug.



greiner bio-one

Headquarters: Greiner Bio-One GmbH, 4550 Kremsmünster, Austria Tel: (+43) 07583/6791, Fax: (+43) 07583/6318
Greiner Vacuette® North America Inc., 4238 Capital Drive, Monroe, NC 28112, U.S.A. Tel (01) 888-286-3883
www.gbo.com / office@at.gbo.com