

Art. Nr.	Beschreibung	Verpackung	
		Innen	Außen
<b>VACUETTE® QUICKSHIELD Sicherheitsröhrchenhalter</b>			
450230	VACUETTE® QUICKSHIELD Sicherheitsröhrchenhalter	50 Stk.	1000 Stk.
450238	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete 21G x 1", steril Sicherheitsröhrchenhalter & VACUETTE® Mehrfachentnahmekanülen Kombiprodukt	30 Stk.	300 Stk.
450237	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete 21G x 1 1/2", steril Sicherheitsröhrchenhalter & VACUETTE® Mehrfachentnahmekanülen Kombiprodukt	30 Stk.	300 Stk.
450234	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete 22G x 1", steril Sicherheitsröhrchenhalter & VACUETTE® Mehrfachentnahmekanülen Kombiprodukt	30 Stk.	300 Stk.
450206	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete 22G x 1 1/2", steril Sicherheitsröhrchenhalter & VACUETTE® Mehrfachentnahmekanülen Kombiprodukt	30 Stk.	300 Stk.
450235	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS 21G x 1", steril Sicherheitsröhrchenhalter & VACUETTE® VISIO PLUS Kanülen Kombiprodukt	30 Stk.	300 Stk.
450239	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS 21G x 1 1/2", steril Sicherheitsröhrchenhalter & VACUETTE® VISIO PLUS Kanülen Kombiprodukt	30 Stk.	300 Stk.
450226	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS 22G x 1", steril Sicherheitsröhrchenhalter & VACUETTE® VISIO PLUS Kanülen Kombiprodukt	30 Stk.	300 Stk.
450228	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS 22G x 1 1/2", steril Sicherheitsröhrchenhalter & VACUETTE® VISIO PLUS Kanülen Kombiprodukt	30 Stk.	300 Stk.
<b>VACUETTE® Mehrfachentnahmekanülen (steril)</b>			
450047	VACUETTE® Mehrfachentnahmekanüle, rosa 25 x 1.25mm 18G x 1"	100 Stk.	2000 Stk.
450048	VACUETTE® Mehrfachentnahmekanüle, rosa 38 x 1.25mm 18G x 1 1/2"	100 Stk.	2000 Stk.
450071	VACUETTE® Mehrfachentnahmekanüle, schwarz 25 x 0.7mm 22G x 1"	100 Stk.	2000 Stk.
450072	VACUETTE® Mehrfachentnahmekanüle, grün 25 x 0.8mm 21G x 1"	100 Stk.	2000 Stk.
450073	VACUETTE® Mehrfachentnahmekanüle, gelb 25 x 0.9mm 20G x 1"	100 Stk.	2000 Stk.
450075	VACUETTE® Mehrfachentnahmekanüle, schwarz 38 x 0.7mm 22G x 1 1/2"	100 Stk.	2000 Stk.
450076	VACUETTE® Mehrfachentnahmekanüle, grün 38 x 0.8mm 21G x 1 1/2"	100 Stk.	2000 Stk.
450077	VACUETTE® Mehrfachentnahmekanüle, gelb 38 x 0.9mm 20G x 1 1/2"	100 Stk.	2000 Stk.
<b>VACUETTE® VISIO PLUS Kanülen (steril)</b>			
450040	VACUETTE® VISIO PLUS Kanüle, grün 38 x 0.8mm 21G x 1 1/2"	100 Stk.	2000 Stk.
450041	VACUETTE® VISIO PLUS Kanüle, schwarz 38 x 0.7mm 22G x 1 1/2"	100 Stk.	2000 Stk.
450042	VACUETTE® VISIO PLUS Kanüle, grün 25 x 0.8mm 21G x 1"	100 Stk.	2000 Stk.
450043	VACUETTE® VISIO PLUS Kanüle, schwarz 25 x 0.7mm 22G x 1"	100 Stk.	2000 Stk.



Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website [www.gbo.com/preanalytics](http://www.gbo.com/preanalytics) oder kontaktieren Sie uns:

**Österreich (Firmenzentrale)**  
Greiner Bio-One GmbH  
Tel (+43) 75 83 67 91-0  
Fax (+43) 75 83 63 18  
E-Mail [office@at.gbo.com](mailto:office@at.gbo.com)

**Deutschland**  
Greiner Bio-One GmbH  
Tel (+49) 201 861 86-0  
Fax (+49) 201 861 86-12  
E-Mail [office@de.gbo.com](mailto:office@de.gbo.com)

**Niederlande**  
Greiner Bio-One B.V.  
Tel (+31) 1 72 42 09 00  
Fax (+31) 1 72 44 38 01  
E-Mail [info@nl.gbo.com](mailto:info@nl.gbo.com)

**Thailand**  
Greiner Bio-One Thailand Ltd  
Tel (+66) 3 84 65 63-30  
Fax (+66) 3 84 65 63-6  
E-Mail [office@th.gbo.com](mailto:office@th.gbo.com)

**Ägypten**  
Greiner Bio-One Middle East  
Tel (+20) 26 21 87 06  
Fax (+20) 26 21 87 08  
E-Mail [hisham.ouda@gbo.com](mailto:hisham.ouda@gbo.com)

**Frankreich**  
Greiner Bio-One SAS  
Tel (+33) 1 69 86 25 50  
Fax (+33) 1 69 86 25 36  
E-Mail [office@fr.gbo.com](mailto:office@fr.gbo.com)

**Schweiz**  
Greiner Bio-One VACUETTE  
Schweiz GmbH  
Tel (+41) 7 12 28 55 22  
Fax (+41) 7 12 28 55 21  
E-Mail [office@ch.gbo.com](mailto:office@ch.gbo.com)

**Ungarn**  
Greiner Bio-One Hungary Kft.  
Tel (+36) 96 21 30 88  
Fax (+36) 96 21 31 98  
E-Mail [office@hu.gbo.com](mailto:office@hu.gbo.com)

**Brasilien**  
Greiner Bio-One Brasil  
Tel (+55) 19 34 68 96 00  
Fax (+55) 19 34 68 96 21  
E-Mail [office@br.gbo.com](mailto:office@br.gbo.com)

**Großbritannien**  
Greiner Bio-One Ltd.  
Tel (+44) 14 53 82 52 55  
Fax (+44) 14 53 82 62 66  
E-Mail [info@uk.gbo.com](mailto:info@uk.gbo.com)

**Spanien**  
VACUETTE Espana S.A.  
Tel (+34) 91 652 77 07  
Fax (+34) 91 652 33 35  
E-Mail [info@vacuette.es](mailto:info@vacuette.es)

**USA**  
Greiner Bio-One North America Inc.  
Tel (+1) 70 42 61 78 00  
Fax (+1) 70 42 61 78 99  
E-Mail [office@us.gbo.com](mailto:office@us.gbo.com)

980052 rev. 03, 09.2009 d



## VACUETTE® QUICKSHIELD Sicherheitsröhrchenhalter

Unsere Innovationen  
für Ihre Sicherheit


## VACUETTE® QUICKSHIELD Sicherheitsröhrchenhalter

Der **VACUETTE® QUICKSHIELD** Sicherheitsröhrchenhalter ist besonders für die tägliche Blutentnahmeroutine geeignet. Ohne Änderung der Entnahmetechnik bietet der Halter Schutz vor Nadelstichverletzungen.



**VACUETTE® QUICKSHIELD** Schutzkappe  
Ist direkt am Halter befestigt. Die Aktivierung der Schutzkappe erfolgt außerhalb der Vene des Patienten.

**VACUETTE® QUICKSHIELD** Sicherheitsröhrchenhalter  
Mit ergonomischem Design. Bietet den Fingern verbesserten Halt.

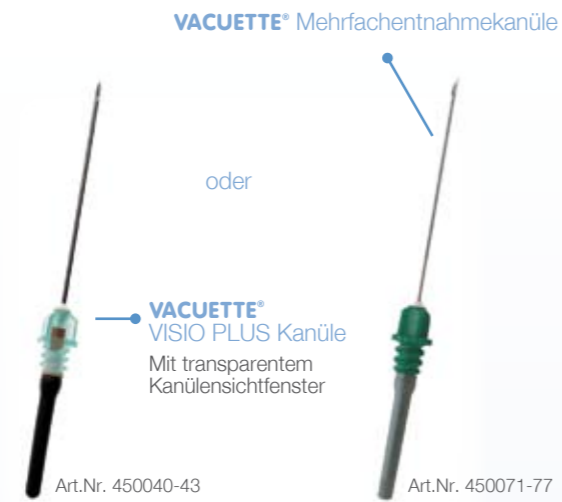

Mit speziellem Schliff für schmerzfreie Punktion. Dank der optimalen Abstimmung der Kanülen auf den Halter befindet sich die „orientierte Nadelspitze“ immer in der richtigen Position für eine einfache Entnahme.

- Aktivierung mit Hilfe einer festen Auflagefläche.
- Besonders benutzerfreundlich durch Aktivierung mit nur einer Hand.
- Der Punkt auf der Nadelschutzkappe ermöglicht es dem Anwender, den Halter optimal für die Venenpunktion zu positionieren
- Zur ausschließlichen Verwendung mit **VACUETTE®** Mehrfachentnahmekanülen oder **VACUETTE®** VISIO PLUS Kanülen.
- Keine Änderung der Entnahmetechnik.
- Besonders sicher, da die Finger immer hinter der Kanülenspitze bleiben.
- Durch Fixierung am Halter bleibt die Schutzkappe bei der Punktion immer in gleicher, stabiler Position.
- Verschluss der Schutzkappe ist durch deutliches „Klicken“ hörbar.



## VACUETTE® QUICKSHIELD Kombiprodukte

Einfach praktisch.  
die **VACUETTE® QUICKSHIELD** Kombiprodukte für die Blutentnahme



Art.Nr. 450237 + 38

### VACUETTE® QUICKSHIELD Complete (Sicherheitsröhrchenhalter & **VACUETTE®** Mehrfachentnahmekanüle Kombiprodukt)

- Vormontierte Kanüle samt Halter in steriler Blisterverpackung.
- Das Einschrauben der Kanüle entfällt.
- Die praktische Komplettlösung spart Zeit.
- Die Handhabung wird optimiert.



Art.Nr. 450235 + 39

### VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS (Sicherheitsröhrchenhalter & **VACUETTE®** VISIO PLUS Kanüle Kombiprodukt)

- Vormontierte Kanüle samt Halter in steriler Blisterverpackung.
- Transparentes Kanülensichtfenster für visuelle Punktionskontrolle.
- Das Einschrauben der Kanüle entfällt.
- Die praktische Komplettlösung spart Zeit.
- Die Handhabung wird optimiert.



## Anwendungshinweise \*



1\*\* Einschrauben der Kanüle



2 Entfernen der Schutzkappe



3 Venenpunktion



4 Einsetzen des Röhrchens



5 Abziehen des Röhrchens



6 Aktivierung des Sicherheitsmechanismus



7 Hörbares Klicken beim Einrasten



8 Entsorgung

\* Den vollständigen Ablauf des Blutentnahmeprozesses finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

\*\* Arbeitsschritt entfällt bei QUICKSHIELD Complete & Complete PLUS.